

Product code: 55791

Digital alcohol tester - with 5 nozzles

## USER'S GUIDE

## Product description:

With this digital alcohol probe you can easily and quickly check the presence of alcohol in your body! Thanks to its compact size, you can carry it anywhere, even in your pocket, and with its handy key ring you can use it as a key ring. Immediately after use, the probe analyzes and displays the measured blood alcohol level on the digital display. You can prevent drunk driving and drunk and accidents with the alcohol probe

- Compact size
- Automatic measurement preparation
- Instant analysis
- LCD display with backlight
- Gray color with key ring
- Auto power off
- Power-saving, battery-operated
- 5 plastic nozzles included

## Device parts:

1. Nozzle
2. Power Button
3. LCD monitor
4. Battery cover
5. Key ring

## Startup:

Open the battery compartment on the back of the device and insert 2 AAA (LR03) 1.5V batteries. Pay attention to correct polarity when inserting batteries. Replace the battery compartment cover. It is recommended that you remove the batteries when not in use for a long time. The device can be operated from a rechargeable battery with the same parameters. The display's backlight flashes to indicate low battery charge level of the batteries.

## To use the device:

1. Preparation (Heating)
  - Press the power button until you hear a beep. Briefly press the power button to turn on the display backlight only for the duration of the button press. (This can be useful in the dark, for example if you want to use it as a key chain).
  - When on the display "Warm -up" is displayed in a countdown (10-0) when the counter reaches zero, the device is ready for operation.
  - Note: If the preparation process fails, the alcohol probe will automatically restart and restart 1-3 times. Initial use and longer periods of non- use may require cleaning and preparation of the sensor. In this case, press the power button repeatedly until the device is ready for measurement.
2. Alcohol level measurement
  - "Blow" appears on the display to indicate that the preparation was successful and the device will count down to 10-0. During the countdown blow into the mouthpiece of the product continuously, with a constant and uniform air flow. There is no need to put the nozzle in the mouth, just close to the mouth.
  - For successful measurement, blow into the nozzle for 3-5 seconds. After the countdown, the analysis of the measured

values begins and the result appears on the display.

- "Caution" will be displayed if the reading is between 0.02% (0.2 g / l) and 0.05% BAC (0.5 g / l).
  - "Danger" will be displayed if the measured value is equal to or greater than 0.05% BAC (or 0.5 g / l).
3. Auto power off
    - The unit automatically switches off after ~ 10 seconds after the measurement, ensuring long life and environmentally conscious operation. If the preparation failed, the device will turn off automatically.
- Note:
- It is the manufacturer's recommendation to double-check your blood alcohol level 2-3 times in a row to make sure it is accurate.
  - Blinking of the display backlight may indicate that the batteries are low.

## Warnings:


- We recommend that you wait 20 minutes after drinking alcohol to check the alcohol level, as alcohol will be absorbed into the digestive tract and only then will it be detectable and the alcohol remaining in your mouth will take time to evaporate.
- Wait at least 3 minutes between two measurements to obtain an accurate result.
- Do not smoke or eat any food for 20 minutes between drinking and measuring.
- Do not use chemicals to clean the device.
- Do not spray liquid into the nozzle!
- Do not use paint, insecticides or other alcoholic substances near the appliance.
- Do not expose the device to contaminated air as this may affect the measurement.
- The measurement results of this alcohol probe are for reference only and the manufacturer and the distributor accept no liability whatsoever.

## Proclamation!

The air-based alcohol tester should only be used to indicate the presence of alcohol in the air or blood. It must not be the device to determine the toxicity degree or if it's safe to drive, handle machinery or perform hazardous activities.

## Specification:

Measuring range:	0.00 - 0.19% BAC (blood alcohol level) or 0.0 - 1.9 g / l
Accuracy:	0.01% BAC (blood alcohol level)
Power supply:	2 x 1,5 V AAA (battery not included)
Display:	1.14" LCD
Backlight:	Orange, Automatic
Material:	Plastic
Size:	114 x 70 x 29 mm
Color:	Gray
Weight:	70 g

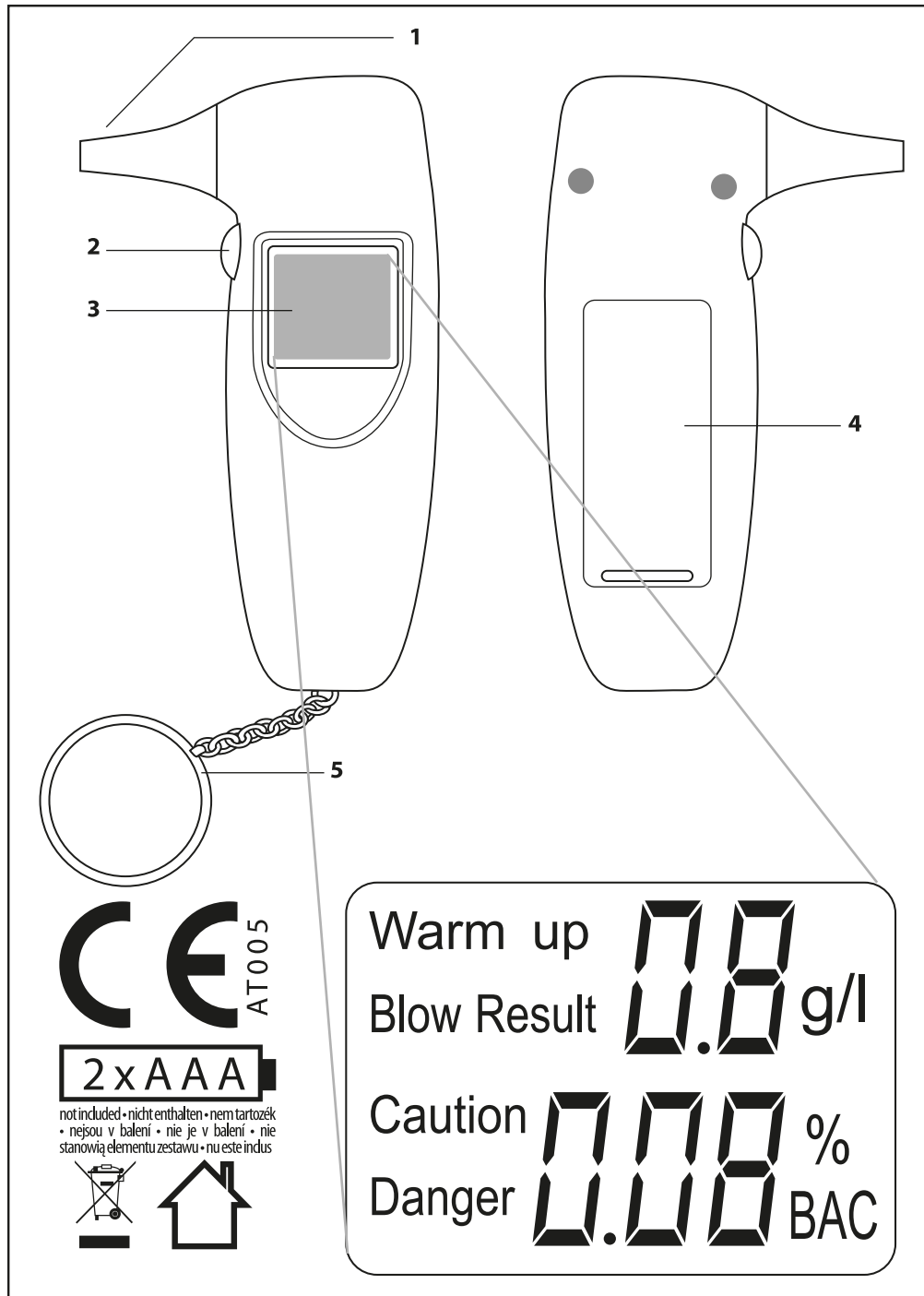

## NÁVOD K POUŽITÍ

## Opis produktu:

Pomocí tohoto digitálního alkoholtestru můžete jednoduše zkontrolovat zda můžete šoférovať.Vďaka kompaktnému rozměru ho můžete vzít s sebou kdekoli, pomocí kroužku jej lze používat i jako klíčenku.Po použití tester okamžitě začne analyzovat a na digitálním displeji se zobrazí hodnota alkoholu v krve.Používáním můžete předejít tomu aby zadržely váš řidičský průkaz a zapříčiněná nehody pod vlivem alkoholu.

- Kompaktný rozměr
- Automatická příprava měření
- Okamžité analyzování
- LCD displej s podsvícením
- Šedá barva,kroužek na klíč
- Automatické vypnutí
- Energicky úsporné fungování pomocí baterií
- 5 ks plastových trubic

## Ovládací prvky přístroje

1. Trubice
2. Tlačítko na zapnutí
3. LCD displej
4. Kryt baterií
5. Kroužek na klíče

## Uvedení do provozu

Otevřete držák baterií na zadní straně přístroje a vložte 2 ks AAA (LR03) 1,5V baterie. Při vložení baterií dbejte na správnou polaritu! Kryt držáku baterií vložte zpět. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, doporučujeme vybrat z přístroje baterie. Přístroj může být provozován i z dobíjecího akumulátoru se stejnými parametry. Blikání podsvícení displeje symbolizuje nízkou úroveň napětí baterie.

## Používání přístroje

1. Příprava (zahriatie)
  - Stiskněte tlačítko pro zapnutí, dokud neuslyšíte pípnutí. Krátkým stisknutím tlačítka na zapnutí se zapne podsvícení displeje na dobu dokud držíte stisknuté tlačítko. (Tato funkce může být užitečná v tmě, pokud chcete používat přístroj jako klíčenku.)
  - Na displeji se zobrazí nápis "Warm up" s odpočítadlom (10-0), pokud se zobrazí 0 přístroj je připraven k měření.
  - Poznámka: Pokud je proces přípravy neúspěšný, přístroj se automaticky restartuje a proces přípravy se 1-3 zopakuje. Při prvním použití nebo pokud jste přístroj déle nepoužívali, bude potřebovat více času na čištění senzoru a na přípravu. V takovém případě stiskněte několikrát tlačítko pro zapnutí, dokud přístroj nebude připraven k provozu.
2. Měření hladiny alkoholu
  - Na displeji se zobrazí nápis "Blow", toto symbolizuje, že příprava byla úspěšná a přístroj začne odečíst 10-0. Během odečtení přidržeťte trubici k vašim ústům a foukněte do trubice rovnoměrnou silou. Není třeba trubici vložit do úst, stačí blízko přiložit.
  - Pro úspěšné měření je třeba foukat do trubice po dobu 3-5 sekund. Po skončení odečtení se spustí analýza měřené hodnoty, výsledek se zobrazí na displeji.

- Na displeji se zobrazí nápis "Caution" jestliže měřená hodnota spadá mezi rozsah 0,02% (0,2 g / l) a 0,05% BAC (0,5 g / l)
- Na displeji se zobrazí nápis "Danger" pokud naměřená hodnota dosáhne nebo přesáhne hodnotu 0,05% BAC (nebo 0,5 g / l).
- 3. Automatické vypnutí
  - Zařízení se automaticky vypne asi po 10 sekundách od měření, takto zajistí dlouhou a ekologický provoz. Pokud proces přípravy byl neúspěšný přístroj se automaticky vypne.
  - Poznámka:
    - Výrobce doporučuje, abyste se ujistili, zda hodnota je správná 2 -3 krát za sebou
    - Blikání podsvícení displeje může znázorňovat nízkou úroveň napětí baterií

## Upozornění:

- Doporučujeme počkat 20 minut po požití alkoholu, abyste zkontrolovali hladinu alkoholu, protože alkohol se vstřebává do zažívacího traktu a až potom bude zjištěný a zbývající alkohol v ústech potřebuje také čas aby se vypařil.
- Pro dosažení co nejpřesnějšího výsledku počkejte mezi 2 měřeními alespoň 3 minuty.
- Nepoužívejte chemikálie na čištění produktu!
- Do trubice nefoukejte kapalínu!
- V blízkosti přístroje nepoužívejte barvy, odpuzovače hmyzu a jiné materiály obsahující alkohol.
- Přístroj nevystavujte znečištěnému ovzduší, protože to může ovlivnit výsledek měření
- Výsledek měření tohoto alkoholtestru slouží pouze jako reference, výrobce a distributor nepřebírají žádnou zákonnou odpovědnost.

## VYHLÁSENÍ!

Tester alkoholu na bázi vzduchu by se měl používat pouze k označení přítomnosti alkoholu ve vzduchu nebo krve. Při určování stupně otravy nebo toho, zda je bezpečné řídit, obsluhovat stroje nebo vykonávat nebezpečné činnosti, se nespolehejte výhradně na zařízení.

## Specifikace:

Rozsah měření:	0,00 - 0,19% BAC (hladina alkoholu v krve) nebo 0,0 - 1,9 g/l
Přesnost:	0,01% BAC (hladina alkoholu v krve)
Napájení:	2 x 1,5 V AAA baterie (nejsou součástí balení)
Displej:	1,14" LCD
Podsvícení:	Oranžové, automatické
Materiál:	Plast
Rozměr:	114 x 70 x 29 mm
Barva:	Šedá
Hmotnost:	70 g

## NÁVOD NA POUŽITIE

## Popis produktu:

Pomocou tohto digitálneho alkoholtestru môžete jednoducho skontrolovať či môžete šoférovať.Vďaka kompaktnému rozmeru ho môžete zobrať so sebou kdekolvek, pomocou krúžku ho môžete používať aj ako kľúčenku.Po použití tester okamžite začne analyzovať a na digitálnom displeji sa zobrazí hodnota alkoholu v krvi.Používaním môžete predísť tomu aby zadržali váš vodičský preukaz a zapríčineniu nehody pod vplyvom alkoholu.

- Kompaktný rozmer
- Automatická príprava merania
- Okamžité analyzovanie
- LCD displej s podsvietením
- Sivá farba,krúžok na kľúč
- Automatické vypnutie
- Energicky úsporné fungovanie pomocou batérií
- 5 ks plastových trysiek

## Ovládacie prvky prístroja

1. Trubica
2. Tlačidlo na zapnutie
3. LCD displej
4. Kryt batérií
5. Krúžok na kľúče

## Uvedenie do prevádzky

Otvorte držiak batérií na zadnej strane prístroja a vložte 2 ks AAA (LR03) 1,5V batérie. Pri vložení batérií dbajte na správnu polaritu! Kryt držiaka batérií vložte späť. Ak prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, doporučujeme vybrať z prístroja batérie. Prístroj môže byť prevádzkovaný aj z nabíjateľnej batérie s rovnakými parametrami. Blikanie podsvietenia displeja symbolizuje nízkou úroveň napätia batérie.

## Používanie prístroja

1. Příprava (zahriatie)
  - Stlačte tlačidlo na zapnutie, až kým nepočujete pípnutie. Krátkym stlačením tlačidla na zapnutie sa zapne podsvietenie displeja na dobu kým držíte stlačené tlačidlo. (Táto funkcia môže byť užitočná v tme, ak chcete používať prístroj ako kľúčenku.)
  - Na displeji sa zobrazí nápis „Warm up“ s odpočítadlom ( 10-0), ak sa zobrazí 0 prístroj je pripravený na meranie.
  - Poznámka: Ak je proces prípravy neúspešný, prístroj sa automaticky reštartuje a proces prípravy sa 1-3 zopakuje. Pri prvom použití alebo ak ste prístroj dlhšie nepoužívali, bude potrebovať viac času na čistenie senzoru a na prípravu. V takomto prípade stlačte viackrát tlačidlo na zapnutie, až kým prístroj nebude pripravený na prevádzku.
2. Meranie hladiny alkoholu
  - Na displeji sa zobrazí nápis „Blow“, toto symbolizuje, že príprava bola úspešná a prístroj začne odrátať 10-0. Počas odrátania pridržte trubicu k vašim ústam a fúknite do trubice rovnomernou silou. Nie je potrebné trubicu vložiť do úst, stačí blízko priložiť.
  - Pre úspešné meranie je potrebné fúkať do trubice po dobu 3-5 sekúnd. Po skončení odrátania sa spustí analýza meranej hodnoty, výsledok sa zobrazí na displeji.
  - Na displeji sa zobrazí nápis „ Caution“ ak meraná hodnota spadá medzi rozsah 0,02% (0,2 g/l) a 0,05% BAC (0,5 g/l)

- Na displeji sa zobrazí nápis „ Danger“ ak nameraná hodnota dosiahne alebo presiahne hodnotu 0,05% BAC (alebo 0,5 g/l).
- 3. Automatické vypnutie
  - Zariadenie sa automaticky vypne asi po 10 sekundách od merania, takto zabezpečí dlhú a ekologickú prevádzku. Ak proces prípravy bol neúspešný prístroj sa automaticky vypne.

- Poznámka:
  - Výrobca odporúča, aby ste sa ubezpečili, či hodnota je správna -3 krát za sebou
  - Blikanie podsvietenia displeja môže znázorňovať nízkou úroveň napätia batérií

## Upozornenia:

- Odporúčame počkať 20 minút po požití alkoholu, aby ste skontrolovali hladinu alkoholu, pretože alkohol sa vstrebáva do zažívacieho traktu a až potom bude zistiteľný a zostávajúci alkohol v ústach potrebuje tiež čas aby sa vypařil.
- Pre dosiahnutie čo najpresnejšieho výsledku počkajte medzi 2 meraniami aspoň 3 minúty.
- Nepoužívajte chemikálie na čistenie produktu!
- Do trubice nefúkajte kvapalínu!
- V blízkosti prístroja nepoužívajte farby, odpudzovače hmyzu a iné materiály obsahujúce alkohol.
- Prístroj nevystavujte znečistenému ovzdušiu, pretože to môže ovplyvniť výsledok merania
- Výsledok merania tohto alkoholtestru slúži len ako referencia, výrobca a distribútor nepreberajú žiadnu zákonnú zodpovednosť.

## VYHLÁSENIE!

Tester alkoholu na báze vzduchu by sa mal používať iba na označenie prítomnosti alkoholu vo vzduchu alebo krvi. Pri určovaní stupňa otravy alebo toho, či je bezpečné viesť vozidlo, obsluhovať stroje alebo vykonávať nebezpečné činnosti, sa nespoliehajte výlučne na zariadenie.

## Špecifikácia:

Rozsah merania:	0,00 - 0,19% BAC (hladina alkoholu v krvy) alebo 0,0 - 1,9 g/l
Přesnosť:	0,01% BAC (hladina alkoholu v krvy)
Napájanie:	2 x 1,5 V AAA batérie (nie sú v balení)
Displej:	1,14" LCD
Podsvietenie:	Oranžové, automatické
Materiál:	Plast
Rozmery:	114 x 70 x 29 mm
Farba:	Sivá
Hmotnosť:	70 g

## GEBRAUCHSANWEISUNG

## Produktbeschreibung:

Mit diesem digitalen Alkoholtester können Sie einfach und schnell das Vorhandensein von Alkohol in Ihrem Körper überprüfen. Dank seiner kompakten Größe kann er überall mitgenommen werden, sogar in der Hosentasche als Schlüsselhalter. Nach dem Gebrauch analysiert der Alkoholtester und zeigt den gemessenen Blutalkoholspiegel auf dem digitalen Display an. Mit dem Alkoholtester können Sie verhindern, dass Sie betrunken fahren bzw. einen Unfall verursachen.

- Kompakte Größe
- Automatische Messvorbereitung
- Sofortige Analyse
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- In grauer Farbe, mit Schlüsselring
- Automatische Ausschaltung
- Energieeffizient, batteriebetrieben
- 5 x Kunststoffdüsen (enthalten)

## Steuerungsteile des Geräts:

1. Düse
2. Einschalttaste
3. LCD-Anzeige
4. Batterieabdeckung
5. Schlüsselring

## Installierung:

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts und legen Sie zwei 1,5V-AAA-Batterien (LR03) ein. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität. Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an. Es wird empfohlen, die Batterien zu entfernen, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen. Das Gerät kann mit einer wiederaufladbaren Batterie mit den gleichen Parametern betrieben werden. Das Blinken der Hintergrundbeleuchtung des Displays weist auf den niedrigen Akku-Ladezustand hin.

## Verwendung des Geräts:

1. Vorbereitung (Aufwärmen)
  - Drücken Sie Einschalttaste, bis Sie einen Piepton hören. Drücken Sie kurz die Einschalttaste, um die Hintergrundbeleuchtung des Displays nur kurz einzuschalten. (Dies kann im Dunkeln nützlich sein, wenn Sie es beispielsweise als Schlüsselhalter verwenden möchten.)
  - Das Display zeigt „Warm up“ mit einem Rückwärtszähler (10-0) an, wenn der Zähler Null erreicht, ist das Gerät messbereit.
  - Anmerkung: Wenn der Vorbereitungsprozess fehlschlägt, startet der Alkoholtester automatisch neu und startet die Vorbereitung 1-3 Mal neu. Bei der erstmaligen Verwendung oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, muss der Sensor möglicherweise länger gereinigt und vorbereitet werden. Drücken Sie in diesem Fall mehrfach die Einschalttaste, bis das Gerät messbereit ist.
2. Alkoholspiegel messen:
  - Auf dem Display wird „Blow“ angezeigt, das heißt, die Vorbereitung war erfolgreich und das Gerät zählt von 10 bis 0 zurück. Führen Sie während des Countdowns die Düse in Ihren Mund ein und blasen Sie gleichmäßig Luft in das Produkt ein. Es ist nicht

notwendig, die Düse in den Mund zu stecken, nur in der Nähe des Mundes.

- Für eine erfolgreiche Messung blasen Sie 3-5 Sekunden in die Düse ein. Nach dem Countdown beginnt die Analyse der Messwerte und das Ergebnis wird angezeigt.
- "Caution" wird angezeigt, wenn der Wert zwischen 0,02% (0,2 g/l) und 0,05% BAK (0,5 g/l) liegt.
- "Danger" wird angezeigt, wenn der gemessene Wert 0,05% BAK (oder 0,5 g/l) oder mehr beträgt.
- 3. Automatische Ausschaltung
  - Das Gerät schaltet sich nach ~10 Sekunden nach der Messung automatisch aus, um eine lange Lebensdauer und einen umweltbewussten Betrieb zu gewährleisten. Wenn die Vorbereitung fehlschlägt, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
  - Anmerkung:
    - Es wird vom Hersteller empfohlen, den Blutalkoholspiegel 2-3 Mal hintereinander zu überprüfen, um sicherzustellen, dass er korrekt ist.
    - Das Blinken der Hintergrundbeleuchtung des Displays weist auf den niedrigen Akku-Ladezustand hin.

## Warnungshinweise:

- Wir empfehlen, dass Sie 20 Minuten nach dem Trinken von Alkohol warten, um Ihren Alkoholspiegel zu prüfen, da Alkohol in den Verdauungstrakt aufgenommen wird und erst dann erkennbar wird; sowie der in Ihrem Mund verbleibende Alkohol braucht einige Zeit, um zu verdunsten.
- Warten Sie zwischen zwei Messungen mindestens 3 Minuten, um ein genaues Ergebnis zu erhalten.
- Während der 20 Minuten zwischen Trinken und Messen nichts essen oder rauchen.
- Verwenden Sie keine Chemikalien zum Reinigen des Geräts.
- Sprühen Sie keine Flüssigkeit in die Düse.
- Verwenden Sie keine Farben, Insektizide oder andere alkoholische Substanzen in der Nähe des Geräts.
- Setzen Sie das Gerät keiner kontaminierten Luft aus, da dies die Messergebnisse beeinträchtigen kann.
- Die Messergebnisse dieses Alkoholtesters dienen nur als Referenz. Der Hersteller und der Händler übernehmen keine gesetzliche Haftung.

## ERKLÄRUNG.

Der Alkoholtester sollte nur verwendet werden, um das Vorhandensein von Alkohol in der Luft oder im Blut anzuzeigen. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf das Gerät, um den Vergiftungsgrad zu bestimmen oder um festzustellen, ob das Führen von Fahrzeugen, das Bedienen von Maschinen oder gefährliche Tätigkeiten sicher sind.

## Spezifikation:

Messbereich:	0,00 - 0,19% BAK (Blutalkoholkonzentration) oder 0,0 - 1,9 g/l
Genauigkeit:	0,01% BAC (Blutalkoholspiegel)
Stromversorgung:	2 x 1,5 V AAA Batterien (nicht enthalten)
Display:	1,14" LCD
Hintergrundbeleuchtung:	Orange, automatisch
Material:	Kunststoff
Größe:	114 x 70 x 29 mm
Farbe:	Grau
Gewicht:	70 g

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## Termékleírás:

Ezzel a digitális alkoholszondával könnyen és gyorsan ellenőrizheti az alkohol jelenlétét a szervezetében! Kompakt méretének köszönhetően bárhová magával viheti, akár zsebben is elfér, a praktikus kulcskarikának köszönhetően használhatja akár kulcstartóként is. A szonda használat után azonnal analizál és a digitális kijelzőn megjelenik a mért véralkoholszint. Az alkoholszondával megelőzheti, hogy ittasan vezessen és az ittasság miatt baleset okozója legyen.

- Kompakt méret
- Automatikus mérés előkészítés
- Azonnali analízis
- LCD kijelző, háttérvilágítással
- Szürke színben, kulcskarikával
- Automatikus kikapcsolás
- Energiatakarékos, elemes működés
- 5 db tartozék műanyag fúvóka

## A készülék kezelőszervei:

1. Fúvóka
2. Bekapcsoló gomb
3. LCD kijelző
4. Elemfedél
5. Kulcskarika

## Üzembe helyezés:

Nyissa ki a készülék hátoldalán található elemtartót, majd helyezzen be 2 db AAA (LR03) 1,5 V-os elemet. Az elemek behelyezésénél figyeljen oda a helyes polarításra! Tegye vissza az elemtartó fedelét. Ha sokáig nem használja a készüléket javasolt az elemek eltávolítása. A készülék ugyanilyen paraméterekkel rendelkező újratölthető akkumulátorral is üzemeltethető. A kijelző háttérvilágításának villogása az elemek alacsony töltöttségi szintjét jelezheti.

## A készülék használata:

1. Előkészítés (Felfűtés)
  - Nyomja meg a bekapcsoló gombot, amíg csipogó hangot nem hall. A bekapcsoló gomb rövid megnyomása csak a kijelző háttérvilágítását kapcsolja be a gombnyomás időtartamáig. (Ez hasznos lehet sötétben, például ha kulcstartóként akarja használni).
  - A kijelzőn a „Warm up” felirat jelenik meg egy visszazámlálóval (10-0), ha a számláló elérte a nullát a készülék készen áll a mérésre.
  - Megjegyzés: Ha az előkészítési folyamat sikertelen, az alkoholszonda automatikusan újraindul és 1-3 alkalommal újakezdi az előkészítést. Első használat, valamint ha hosszabb ideig nem használja a készüléket több időre lehet szükség a szenzor tisztításához és előkészítéséhez. Ilyen esetben nyomja meg többször a bekapcsoló gombot, amíg készen nem áll az eszköz a mérésre.
2. Alkoholszint mérése
  - A kijelzőn megjelenik a „Blow” felirat, ez jelzi, hogy az előkészítés sikeres volt és az eszköz visszazámlál 10-0 között. A visszazámlálás alatt tegye a szájához a fúvókát és folyamatos, egyenletes légáramlattal fújjon bele a terméke. A fúvókát nem szükséges a

szájba venni, elég csak közel a szájhoz.

- A sikeres méréshez 3-5 mp-en keresztül fújjon a fúvókába. A visszazámlálás után megkezdődik a mért értékek elemzése és megjelenik a kijelzőn az eredmény.
- A kijelzőn a „Caution” felirat jelenik meg, ha a mért érték 0,02% (0,2 g/l) és 0,05% BAC (0,5 g/l) véralkoholszint közé esik.
- A kijelzőn a „Danger” felirat jelenik meg, ha a mért érték eléri vagy meghaladja a 0,05% BAC (vagy 0,5 g/l) értéket.
- 3. Automatikus kikapcsolás
  - A készülék a mérést követően ~10 mp után automatikusan kikapcsol, ezzel biztosítva a hosszú üzemidőt és a környezettudatos üzemeltetést. Ha az előkészítés sikertelen volt, az eszköz automatikusan kikapcsol.
  - Megjegyzés:
    - A gyártó ajánlása, hogy biztosan megbizonyosodjon a pontos értékről egymásután 2-3 alkalommal is ellenőrizze a véralkoholszintjét.
    - A kijelző háttérvilágításának villogása az elemek alacsony töltöttségi szintjét jelezheti.

## Figyelmeztetések:

- Javasoljuk, hogy alkoholfogyasztás után várjon 20 percet az alkoholszint ellenőrzésig, mert az alkoholnak fel kell szívódnia az emésztőszervek vérében, csak utána lesz kimutatható, valamint a szájban maradt alkoholnak ennyi idő kell az elpárolgáshoz.
- A pontos eredmény elérése érdekében két mérés között várjon legalább 3 percet.
- Az alkoholfogyasztás és a mérés közötti 20 percen ne dohányozzon és ne fogyasszon semmilyen ételt.
- Ne használjon kémiai anyagokat az eszköz tisztításához!
- Ne fújjon folyadékot a fúvókába!
- Az eszköz közelében ne használjon festéket, rovarirtó szereket és egyéb alkohol tartalmú anyagokat.
- Az eszközt ne tegye ki szennyezett levegőnek, mert az befolyásolhatja a mérés eredményességét.
- Ennek az alkoholszondának a mérési eredménye csak referenciaként szolgál, a gyártó és a forgalmazó semmilyen jogi felelősséget nem vállal.

## NYILATKOZATI!

A levegő alapú alkoholtesztet csak arra lehet használni, hogy jelezzük az alkohol esetleges jelenlétét a levegőben vagy a vérben. Nem szabad csak az eszközre támaszkodni, hogy megállapítsuk a mérgezés mértékét vagy hogy biztonságos-e járművet vezetni, gépet kezelni vagy veszélyes tevékenységet végezni.

## Specifikáció:

Mérési tartomány:	0,00 - 0,19% BAC (véralkohol szint) vagy 0,0 - 1,9 g/l
Pontosság:	0,01% BAC (véralkohol szint)
Tápellátás:	2 x 1,5 V AAA elem (nem tartozék)
Kijelző:	1,14" LCD
Háttérvilágítás:	Narancs, automatikus
Anyaga:	Műanyag
Mérete:	114 x 70 x 29 mm
Színe:	Szürke
Súlya:	70 g

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Opis produktu:

Dzięki tej cyfrowej sondzie alkoholowej możesz łatwo i szybko sprawdzić obecność alkoholu w swoim ciele! Dzięki niewielkim rozmiarom możesz ją nosić wszędzie, nawet w kieszeni, a dzięki poręcznemu kółku na klucze możesz jej używać jako breloczka. Natychmiast po użyciu sonda analizuje i wyświetla zmierzony poziom alkoholu we krwi na wyświetlaczu cyfrowym. Użyj sondy alkoholowej, aby zapobiec prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwym i temu, abyś przez pijaństwo spowodował wypadek.

- Kompaktowy rozmiar
- Automatyczne przygotowanie pomiaru
- Natychmiastowa analiza
- Wyświetlacz LCD z podświetleniem
- Szarego koloru z kółkiem na klucze
- Automatyczne wyłączenie zasilania
- Oszczędzanie energii, zasilanie bateryjne
- W zestawie 5 dysz plastikowych

## Części urządzenia:

1. Dysza
2. Przycisk zasilania
3. Wyświetlacz LCD
4. Uchwyt na baterie
5. Kółko na klucze

## Uruchomienie:

Otwórz uchwyt baterii z tyłu urządzenia i włóż 2 baterie AAA (LR03) 1,5 V. Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na prawidłową biegunowość. Załóż pokrywę uchwytu baterii. Zaleca się wyjmowanie baterii, gdy nie są używane przez dłuższy czas. Urządzenie może być zasilane z akumulatora o takich samych parametrach. Miganie podświetlenia wyświetlacza może wskazywać, że baterie są rozładowane.

## Korzystanie z urządzenia:

1. Przygotowanie
  - Naciśnij przycisk zasilania, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Naciśnij krótko przycisk zasilania, aby włączyć podświetlenie wyświetlacza tylko na czas naciśnięcia przycisku. (Może to być przydatne w ciemności, na przykład, jeśli chcesz użyć go jako breloczka).
  - Wyświetlacz pokaże „Warm up” z odliczaniem czasu (10-0). Gdy licznik osiągnie zero, urządzenie jest gotowe do pomiaru.
  - Notatka: Jeśli proces przygotowania się nie powiedzie, sonda alkoholowa automatycznie uruchomi się ponownie i ponownie zaczyna przygotować pomiar 1-3 razy. Pierwsze użycie i dłuższe okresy nieużywania mogą wymagać czyszczenia i przygotowania czujnika. W takim przypadku naciśnij kilkakrotnie przycisk zasilania, aż urządzenie będzie gotowe do pomiaru.
2. Pomiar poziomu alkoholu we krwi
  - Na wyświetlaczu pojawi się „Blow”, co oznacza, że przygotowanie zakończyło się powodzeniem, a urządzenie odlicza od 0 do 10. Podczas odliczania włóż dyszę do ust i wdmuchaj stały strumień powietrza do sondy. Nie ma potrzeby wkładania dyszy do ust, tylko blisko ust.
  - W celu udanego pomiaru przedmucha dyszę przez 3-5 sekund.

Po odliczeniu rozpoczyna się analiza zmierzonych wartości i wyświetlany jest wynik.

- „Caution” zostanie wyświetlone, jeśli odczyt wynosi między 0,02% (0,2 g/l) a 0,05% BAC (0,5 g/l).
  - „Danger” zostanie wyświetlone, jeśli zmierzona wartość jest równa lub większa niż 0,05% BAC (lub 0,5 g/l).
3. Automatyczne wyłączenie
    - Urządzenie wyłącza się automatycznie po ~10 sekundach od pomiaru, zapewniając długą żywotność i działanie przyjazne dla środowiska. Jeśli przygotowanie się nie powiedzie, urządzenie wyłączy się automatycznie.
    - Notatka:
      - Producent zaleca wykonanie pomiaru 2-3 razy z rzędu, w celu uzyskanie dokładnych wyników poziomu alkoholu we krwi.
      - Miganie podświetlenia wyświetlacza może wskazywać, że baterie są rozładowane.

## Ostrzeżenia:

- *Zalecamy odczekać 20 minut po wypiciu alkoholu, aby sprawdzić poziom alkoholu, ponieważ alkohol zostanie wchłonięty przez przewód pokarmowy i dopiero wtedy będzie można go wykryć, a alkohol pozostający w ustach odparuje.*
- *Odczekaj co najmniej 3 minuty między dwoma pomiarami, aby uzyskać dokładny wynik.*
- *Nie pal ani nie jedz żadnych posiłków przez 20 minut między piciem a pomiarem.*
- *Nie używaj środków chemicznych do czyszczenia urządzenia!*
- *Nie wdmuchuj płynów do dyszy!*
- *Nie używaj farb, środków owadobójczych ani innych substancji alkoholowych w pobliżu urządzenia.*
- *Nie wystawiać urządzenia na zanieczyszczenie powietrza, ponieważ może to wpływać na dokładność pomiarów.*
- *Wyniki pomiarów tej sondy alkoholowej służą wyłącznie jako odniesienie, a producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.*

## OŚWIADCZENIE!

**Tester alkoholowy na bazie powietrza powinien być stosowany wyłącznie w celu wskazania obecności alkoholu w powietrzu lub krwi. Nie należy polegać wyłącznie na urządzeniu w celu określenia stopnia zatrucia lub tego, czy można bezpiecznie prowadzić samochód, obsługiwać maszyny lub wykonywać niebezpieczne czynności.**

## Dane techniczne:

Zakres pomiarowy:	0,00 - 0,19% BAC (poziom alkoholu we krwi) lub 0,0 - 1,9 g/l
Precyzja:	0,01% BAC (poziom alkoholu we krwi)
Źródło zasilania:	2 baterie 1,5 V AAA (brak w zestawie)
Wyświetlacz:	1,14" LCD
Podświetlenie:	Pomarańczowe, automatyczne
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Rozmiar:	114 x 70 x 29 mm
Kolor:	Szary
Waga:	70 g

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

## Descrierea produsului:

Cu această sondă de alcool puteți verifica ușor concentrația de alcool în sânge și dacă sunteți apt pt. conducerea vehiculelor! Datorită dimensiunii compacte puteți să o aveți oricând la Dvs., iar cu ajutorul inelului puteți să o folosiți și în loc de breloc. Imediat după utilizare, sonda analizează și afișează pe afișajul digital nivelul de alcool din sânge măsurat. Cu ajutorul sondei puteți preveni suspendarea carnetului de conducere, sau participarea la vreun accident de circulație.

- Dimensiune compactă
- Pregătirea automată a măsurării
- Analiză instantanee
- Afișaj LCD cu iluminare de fundal
- Culoare Gri, cu inel breloc
- Decuplare automată
- Funcționare economicoasă de la baterii
- 5 buc. ajutaje din mat. plastic - accesorii

## Organele de comandă ale aparatului:

1. Ajutaj
2. Buton ON/OFF
3. Afișaj LCD
4. Capac baterie
5. Inel breloc

## Punerea în funcțiune:

Deschideți compartimentul bateriei din spatele aparatului și introduceți 2 baterii AAA (LR03) 1,5V. La introducerea bateriilor respectați polaritatea corectă! Reașezați capacul locașului bateriei. Dacă nu folosiți aparatul timp îndelungat, îndepărtați bateriile. Aparatul poate fi utilizat și cu acumulatori reincărcabile cu parametri asemănători. Clipirea intermitentă a iluminării de fundal al afișajului indică faptul că bateriile sunt epuizate.

## Utilizarea aparatului:

1. Pregătirea utilizării (preîncălzirea)
  - Apăsăți butonul de pornire până când auziți un bip sonor. Apăsarea scurtă a butonul de pornire activează iluminarea de fundal a afișajului doar pe durata apăsării butonului. (Acest lucru poate fi util în întineric, de exemplu, dacă doriți să utilizați aparatul ca un breloc).
  - Pe afișaj va apărea „War up” cu un contor (10-0). Când contorul ajunge la zero, unitatea este gata de măsurare.
  - Notă: Dacă procesul de preparare eșuează, aparatul va reporni automat și va reîncepe pregătirea măsurării de 1-3 ori. La prima utilizare, sau după perioade mai lungi de neutilizare, curățirea și pregătirea senzorului pot necesita timp mai îndelungat. În acest caz, apăsați butonul de alimentare în mod repetat până când aparatul este gata pentru măsurare.
2. Măsurarea concentrației de alcool
  - Pe AFIȘAJ apare „Blow” pentru a indica faptul că pregătirea a avut loc cu succes și aparatul va începe număratoarea inversă 10-0. În timpul numărătorii inverse, introduceți ajutorul în gură și suflați un flux de aer constant în aparat. Nu este necesară introducerea ajutorului în gură, fiind suficientă doar și apropierea gurii de acesta.

- Pt. o măsurare corectă suflați timp de 3-5 sec. în aparat. După terminarea numărătorii inverse, începe analiza valorilor măsurate și afișarea rezultatului.
  - Pe afișaj va apare mesajul „Caution” dacă valoarea măsurată a concentrației alcoolice în sânge este cuprinsă între 0,02% (0,2 g / l) și 0,05% (0,5 g / l).
  - Pe afișaj va apare mesajul „Danger” dacă valoarea măsurată a concentrației alcoolice în sânge atinge sau depășește valoarea de 0,05% (0,5 g / l).
3. Decuplare automată
    - Aparatul se oprește automat după ~ 10 secunde după ultima măsurare, asigurând un timp de funcționare îndelungat și o funcționare ecologică. Dacă pregătirea măsurării eșuează, aparatul se va opri automat.
    - Notă:
      - Recomandarea producătorului este să vă verificați de două ori la rând nivelul alcoolului din sânge pentru a vă asigura că măsurarea este corectă.
      - Iluminarea intermitentă a iluminării de fundal al afișajului indică faptul că bateriile sunt epuizate.

## Atenționări:

- *Vă recomandăm să așteptați 20 de minute după consumul de alcool pentru a vă verifica nivelul de alcool, deoarece alcoolul trebuie absorbit în tractul digestiv, numai atunci devenind detectabil. Totodată, alcoolul rămas necesită de asemenea timp până la evaporare.*
- *Pentru o determinare cât mai precisă, așteptați cel puțin 3 minute între două determinări.*
- *Nu fumați și nu consumați nici un aliment timp de 20 de minute între consumul de alcool și efectuarea măsurării.*
- *Nu folosiți substanțe chimice pt. curățirea aparatului!*
- *Nu pulverizați lichide în ajutor!*
- *Nu folosiți vopsea, insecticide sau alte substanțe alcoolice în apropierea aparatului.*
- *Nu expuneți aparatul la aer contaminat, deoarece acesta poate afecta precizia de măsurare.*
- *Rezultatele măsurătorilor acestei sonde de alcool au doar caracter informativ, iar producătorul și distribuitorul nu își asumă nici o răspundere legală privitoare la utilizarea aparatului.*

## DECLARAȚIE!

**Testerul de alcool pe bază de aer trebuie utilizat numai pentru a indica prezența alcoolului în aerul expirat, respectiv în sânge. Nu va bazați doar pe aparat pentru a determina gradul de intoxicare sau să decideți dacă sunteți apt să conduceți, să folosiți utilaje sau să desfășurați activități periculoase.**

## Specificații:

Domeniu de măsurare:	0,00 - 0,19% BAC (concentrația de alcool în sânge) sau 0,0 - 1,9 g/l
Precizia:	0,01 % BAC (concentrația de alcool în sânge)
Alimentare:	Baterii 2 x 1,5 V AAA (nu este accesoriu)
Afișaj:	LCD 1,14"
Iluminare de fundal:	Automatică, portocalie
Materiale:	Materiale plastic
Dimensiuni:	114 x 70 x 29 mm
Culoare:	Gri
Masa:	70 g